

Sulz am Neckar, Dezember 2015

S-Guide – Die neue und einzigartige Intubationshilfe zum schwierigen Atemweg

Bis zu 3% aller chirurgischen Patienten weisen einen sogenannten schwierigen Atemweg auf, welcher die Laryngoskopie erschwert und teilweise sogar unmöglich macht. Eine Option zur Überwindung des schwierigen Atemweges ist der Einsatz von Intubationshilfen und Stiletten.

Die neue VBM Intubationshilfe **S-Guide** vereint die grundlegenden Spezifikationen, die normalerweise Introducer und Stilette unterscheiden. Er wurde in Zusammenarbeit mit PD Dr. Patrick Schoettker vom Universitätsklinikum Lausanne/Schweiz entwickelt.

Er kombiniert drei Vorteile in einem Produkt:

1. Oxygenierung

Die Apnoe kann durch Sauerstoffgabe über den speziellen O₂-Konnektor verlängert werden. Das 23 cm lange flexible Segment vereinfacht den Anschluss an die Sauerstoffzufuhr ohne die Platzierung des S-Guide zu beeinträchtigen.

2. Beweglichkeit

Das formbare Segment ermöglicht die Anpassung des S-Guide in beliebigem Winkel von der orangenen Spitze bis zu einer Länge von 42 cm. Die Hockeyschläger-Form am distalen Ende sowie der rechte Winkel am Konnektor des ET Tubus beeinträchtigen die Oxygenierung nicht.

3. Multifunktionale Spitze

Die vorgeformte, weiche und farbige distale Spitze erhöht die Patienten- und Anwendungssicherheit. Durch die drei Öffnungen am distalen Ende wird eine Hypoxie verhindert.

Der **S-Guide** kann somit die Vorteile der neuen Systeme zur Visualisierung des Atemweges ideal ergänzen. Gerade bei der zunehmenden Verwendung von Videolaryngoskopen, bei denen weniger die Sicht auf die Glottis sondern die Platzierung des ET Tubus das Problem darstellt.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.vbm-medical.de

Über VBM Medizintechnik GmbH:

Die VBM Medizintechnik GmbH mit Sitz in Sulz am Neckar beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert innovative Produkte für das Airway Management, Zubehör für Anästhesie und Intensivpflege sowie Blutsperrgeräte für chirurgische Eingriffe im blutleeren Feld. VBM Produkte werden weltweit in über 100 Länder durch Vertriebspartner oder eigene Niederlassungen verkauft.

Presse-Kontakt

Telefon +49 7454 9596 0
presse@vbm-medical.de

Verwandte Begriffe und Stichworte:

Airway Management, schwierige Intubation, schwieriger Atemweg, Bougie, Mandrin, Introducer, Intubationshilfe, Stilette, Videolaryngoskop, Laryngoskopie, endotracheale Intubation, Atemwegsmanagement

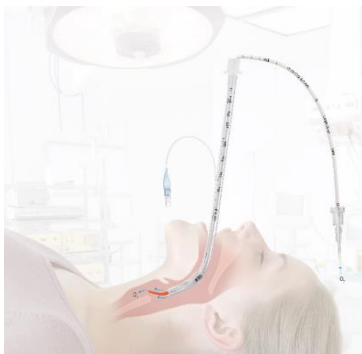


Bild 1

Dateiname:

VBM_S-Guide Anatomy Cross Section



Bild 2

Dateiname:

Image 2 S-Guide with O2 connector